

Адаптер под пирамидку с зажимом
под трубку голени 30 мм, 125 кг

409054



endolite

управляй движением




ENDOLITE



5

10 Нм

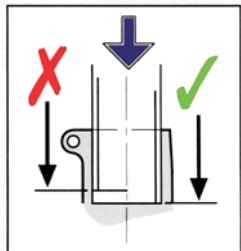


4

15 Нм



4


15 Нм

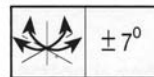

ENDOLITE

Сборочные размеры

Ø 30 мм

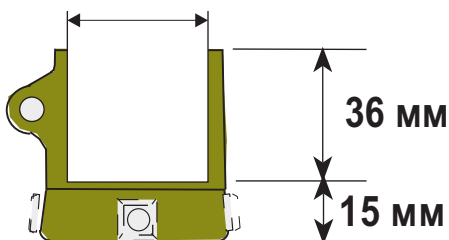

409054

Адаптер под пирамидку
с зажимом

30 мм 125 кг

При затягивании винтов ни в коем случае не допускается превышать соответствующие значения усилий, указанных в данной инструкции! Превышение усилий ведет к разрушению изделия и потере гарантийного обслуживания, поскольку в этом случае явно нарушаются рекомендации производителя по применению изделия. Кроме того для стяжного винта запрещается применение резьбовых фиксаторов. Для затягивания винтов используйте динамометрический ключ с набором насадок (шифр: 940057).

ЭНДОЛАЙТ РОССИЯ

109383, Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 31
+7 (495) 354 - 40 - 03 +7 (495) 354 - 37 - 88
www.blatchford.ru sales@blatchford.ru