


ENDOLITE




Blatchford Products Ltd

Стопа Супер САЧ P529101 - P529114

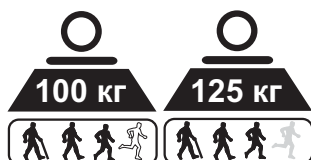


Юстировочный винт. Для получения максимальной жесткости пяточной области винт должен быть полностью завинчен (**ни в коем случае не перетягивайте винт**). Для получения минимальной жесткости пяточной области отвинтите винт на 4 оборота из положения полной затяжки.

ENDOLITE

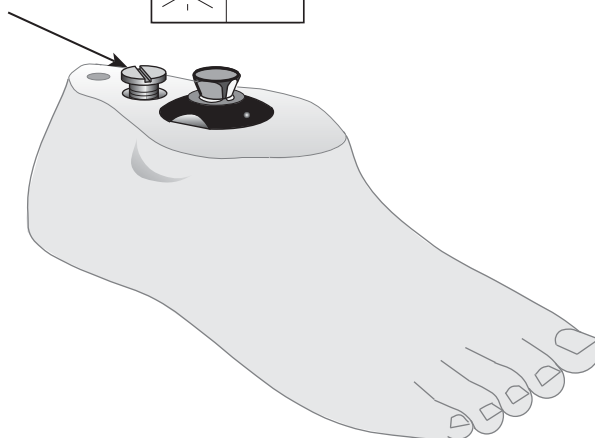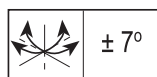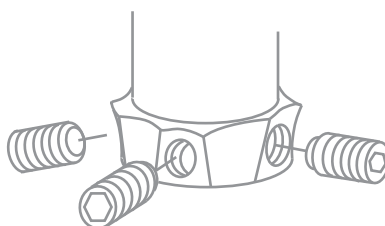

Размер **A**

22см	}	70 мм
23см		
24см		
25см	}	75 мм
26см		
27см	}	80 мм
28см		

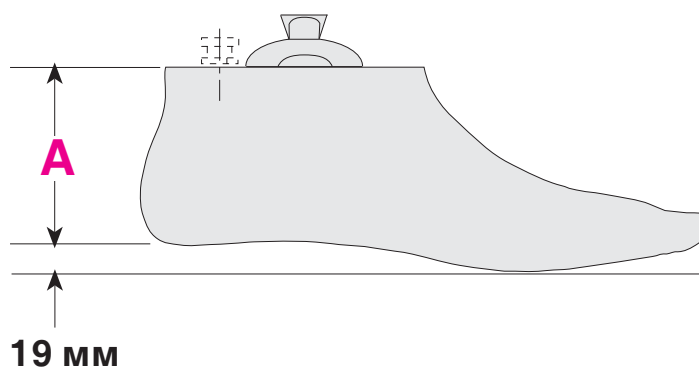

endolite
управляй движением

эндолайт россия

+7 (495) 354 4003

+7 (495) 354 3788

www.endolite.ru
www.blatchford.ru



ИМ 13

938086/06-0705