

endolite
управляй движением



MERCURY


Hi-ACTIVITY

КОЛЕННЫЙ МОДУЛЬ МЕРКУРИЙ ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ

**MHPYR (239352)
MNDPYRS
MNDPYRM
239040, 239041**

Осевая линия
нагрузки


0-5мм

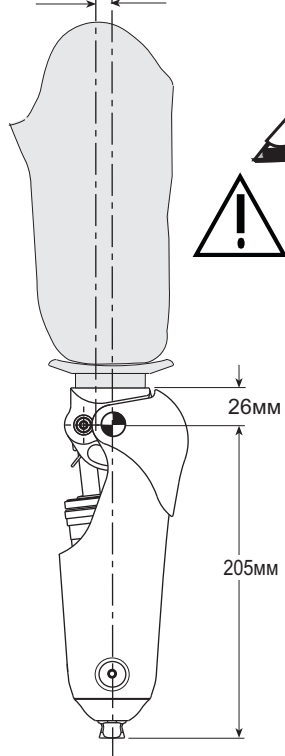

239029 *




endolite

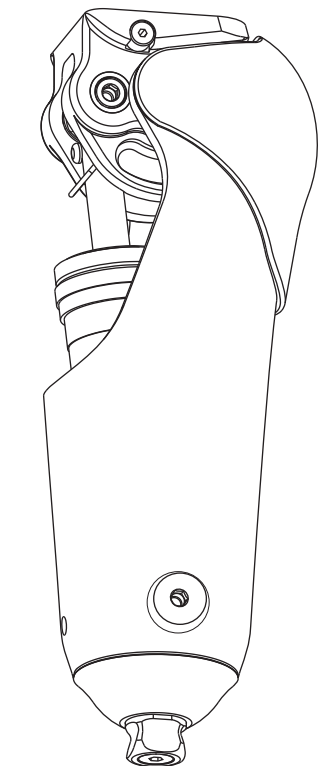

endolite



Для увеличения функциональности коленного модуля, компоненты дистального пирамидного адаптера должны быть зафиксированы с нейтральной юстировкой, а голенная система должна иметь строго вертикальное положение.

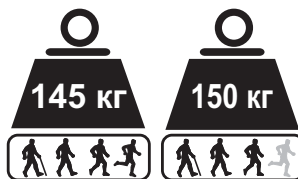

Для инвалидов с весом более 125 кг необходимо использовать комплект голени рассчитанный на соответствующий вес!

Замечание:
Голень для систем высокой активности и коленный шар не показаны





ИМ 13


**MH30 (239252)
MHD30S
MHD30M
239037, 239038**

Осевая линия
нагрузки

0-5мм

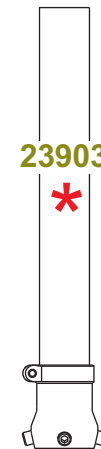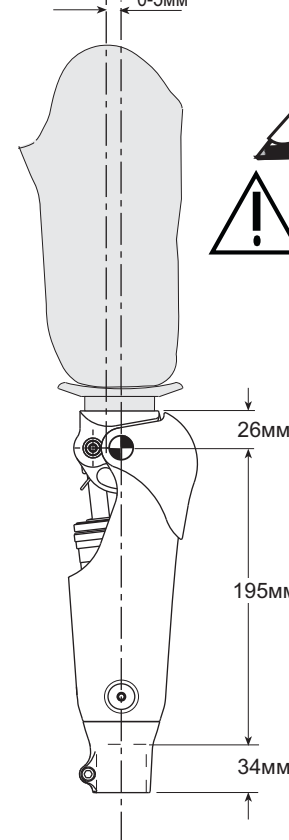

239030 *

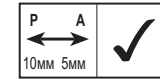

endolite



endolite